

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Вапорайзер PLENTY

1. Откройте рабочую камеру



2. Измельчите субстанцию




### 3. Наполните рабочую камеру




*Всегда наполняйте рабочую камеру полностью до верхней кромки*


### Правильное наполнение

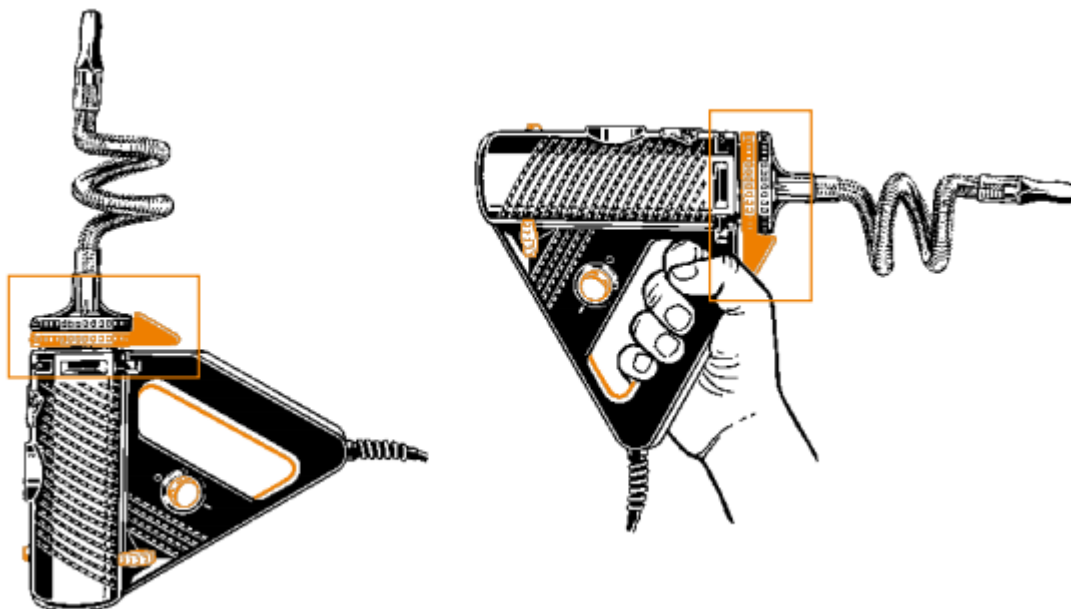

### Правильно

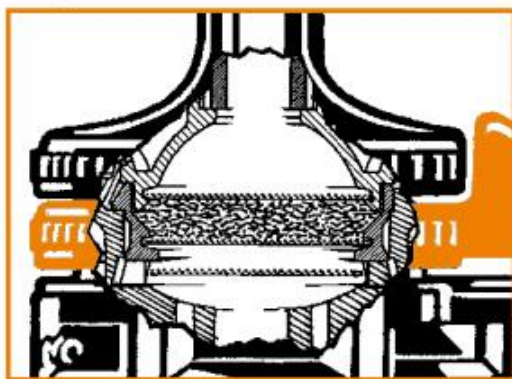


Полностью наполненная рабочая камера

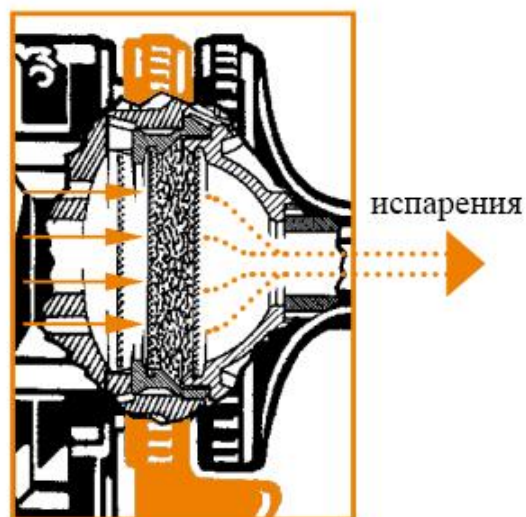





Рабочая камера заполнена не полностью

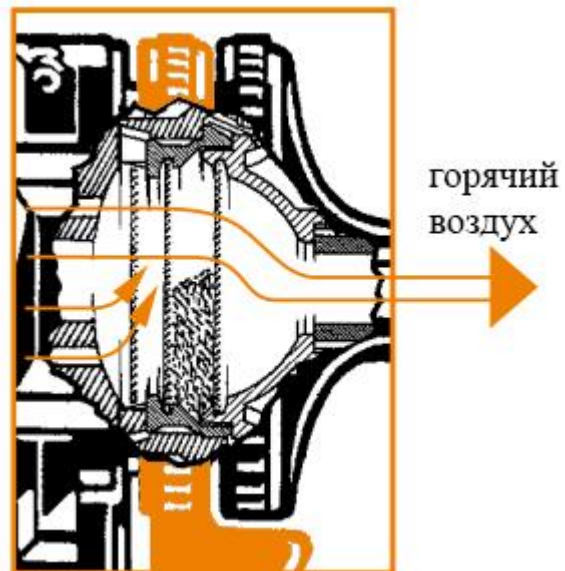


Правильно

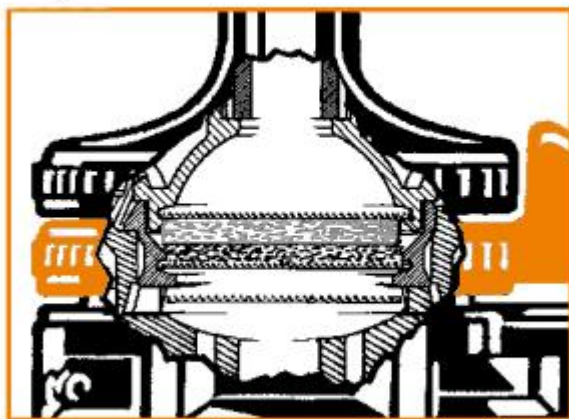


Рабочая камера наполнена не полностью, но сверху находится подушечка для маслянистых жидкостей

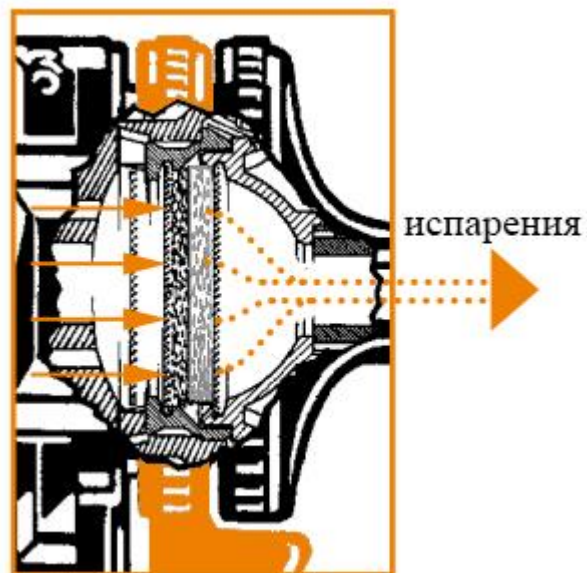


4. Включите устройство (оранжевая кнопка включения питания) и нажмите на ручку автоотключения.

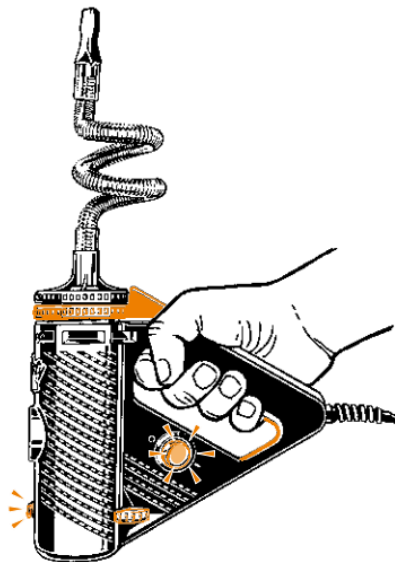

5. Шкала температур, при которых происходит испарение.

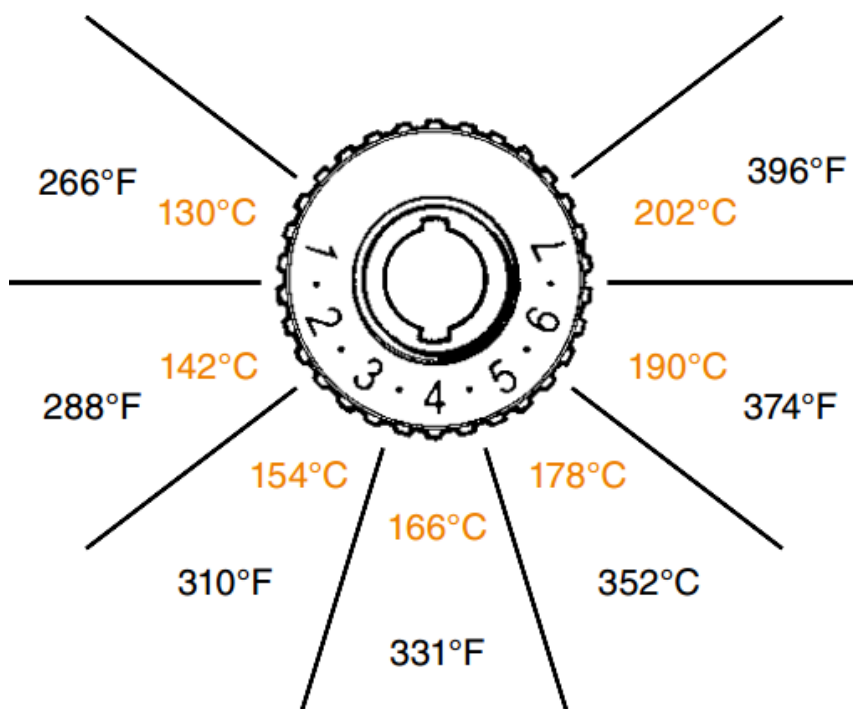

6. Установите нужную вам температуру.

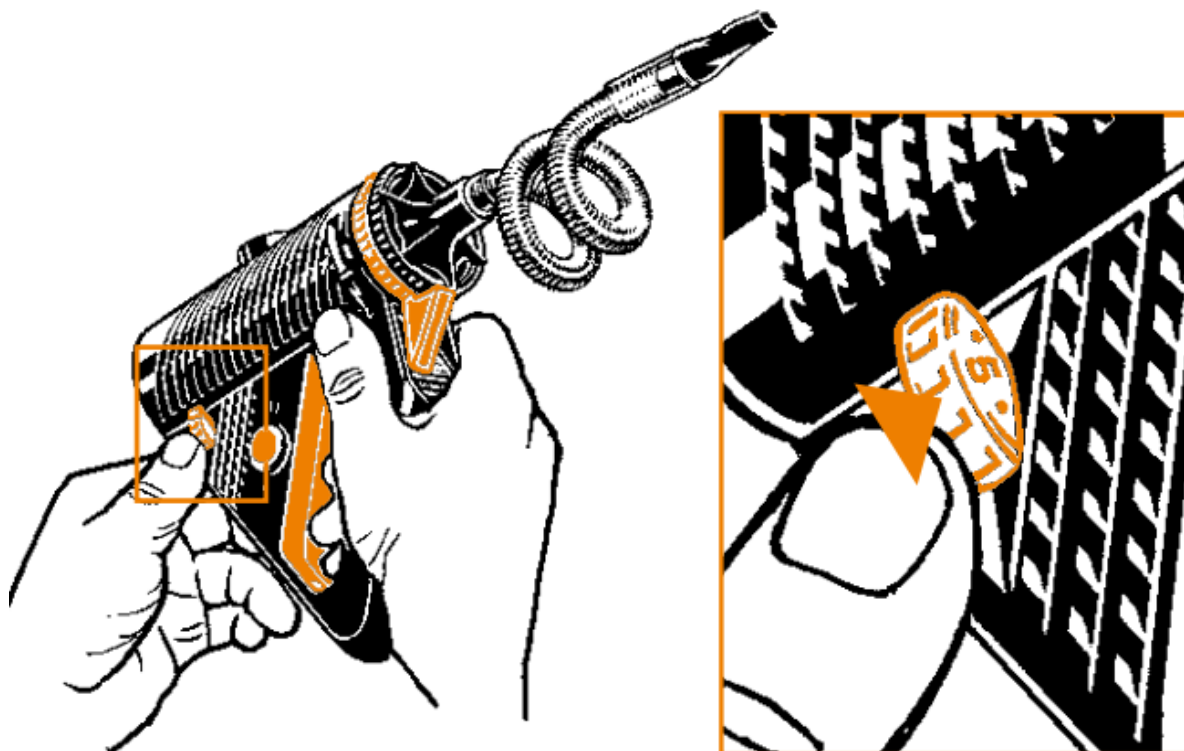


**Прочтите инструкцию по применению, чтобы узнать о мерах безопасности и получить советы по использованию. Не используйте устройство, если вы предварительно не прочитали инструкцию по применению и не поняли ее!**




## Разборка, чистка, замена частей

### 1. Вид блока испарения вапорайзера Plenty в разобранном виде

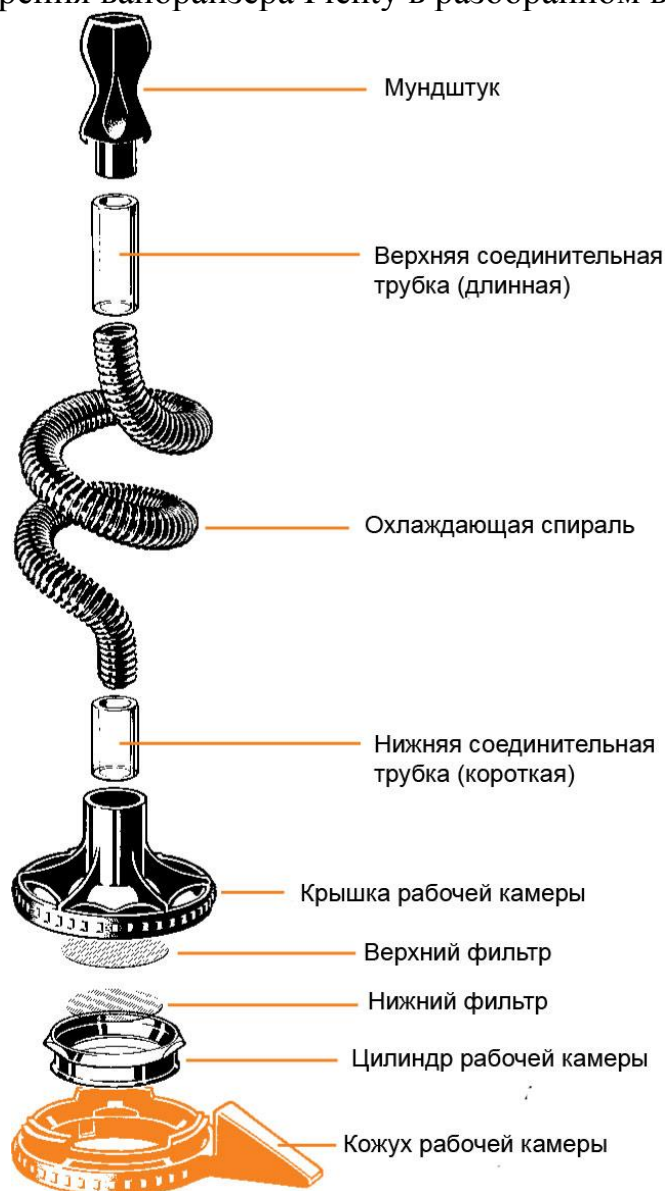


### 2. Извлеките мундштук из охлаждающей спирали

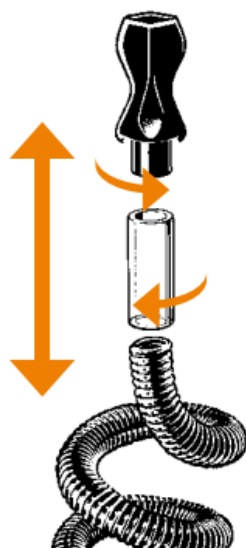


3. Извлеките охлаждающую спираль из крышки рабочей камеры




4. Вытолкните верхний фильтр из крышки, используя щетку для чистки

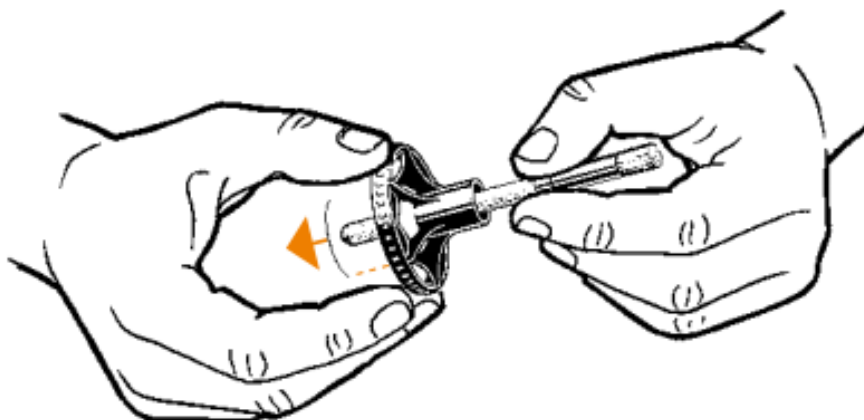

5. Разборка рабочей камеры

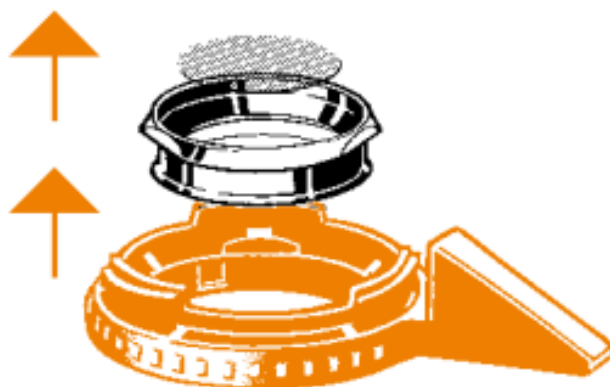

6. Вытолкните цилиндр рабочей камеры

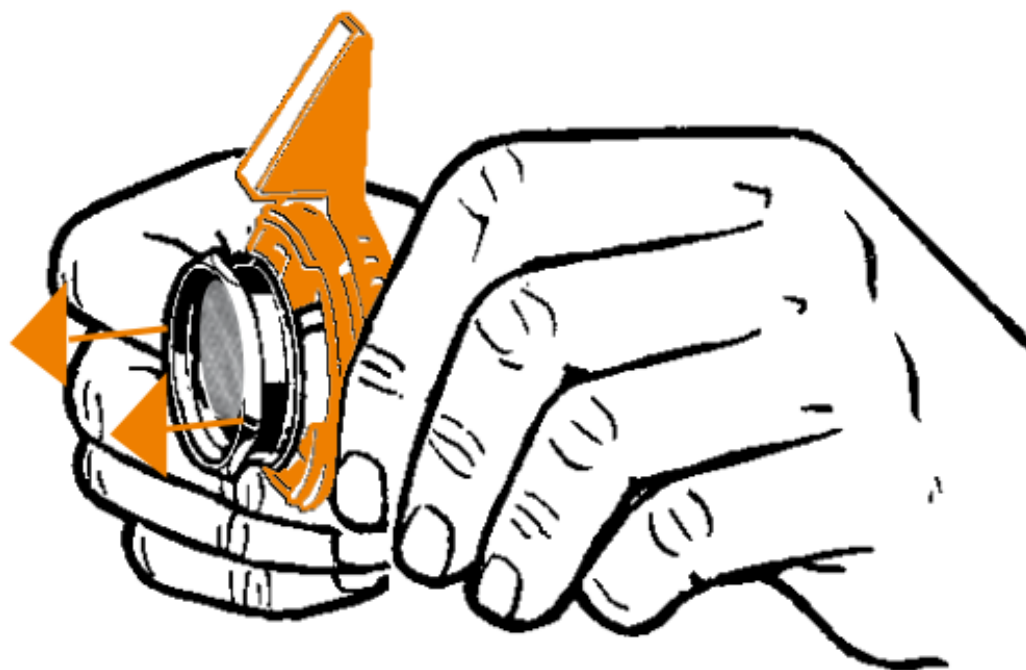

7. Вытолкните нижний фильтр



8. Очистите вручную все детали, используя спирт (минимум 90%) или же средство для мытья посуды



9. Установочные пазы цилиндра рабочей камеры и кожуха рабочей камеры

